

Biochemistry lab

Experiment (8)



EXPIREMNT 8

ENZYMATIC COLORIMETRIC METHOD (END POINT)


Purpose: to determine the concentration of components inside the serum by determining its absorbance, using spectrophotometer.

- Serum: plasma without RBC.
- Serum components: 1-Triglycerides (lipids)
2-glucose (carbohydrates)
3-cholesterol (lipids)
4-albumin (proteins)

Purpose of the experiment: measuring those components' concentrations.

*we will measure the concentration by beer's law:

Remember: $A = (a.b).c$ $\longleftrightarrow A1/C1 = A2/C2$

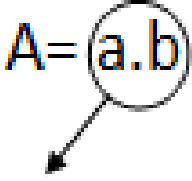

Constant

A: Absorbance.

C: Concentration.

a: absorption coefficient.

b: cuvette's width.

- First, here are some abbreviations you should know:



LPL: Lipoprotein lipase

ATP: Adenosine triphosphate

GK: Glycerol kinase

GPO: Glycerol phosphate oxidase

DHAP: Dihydroxy acetone phosphate

4-AA: 4-amino antipyrine

POD: peroxidase


FFA: Free fatty acid

GOD: Glucose Oxidase


حفظہم مہم جدا.

1st experiment: measuring the concentration of triglycerides.



Triglycerides

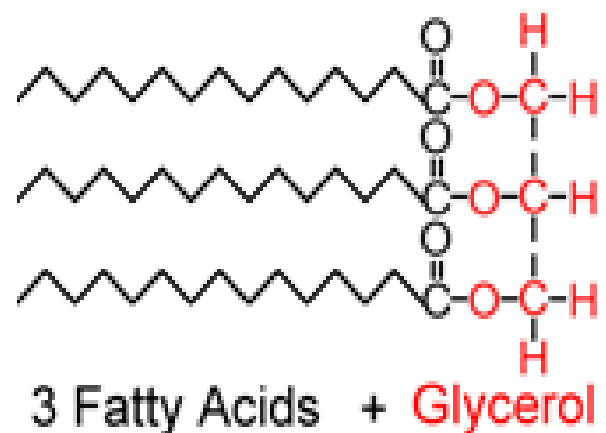

$$\lambda_{\max} = 500 \text{ nm}$$

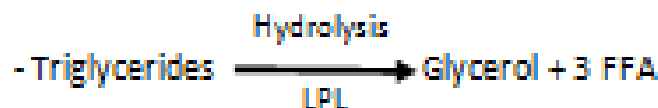

Those should be remembered.

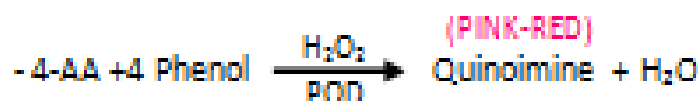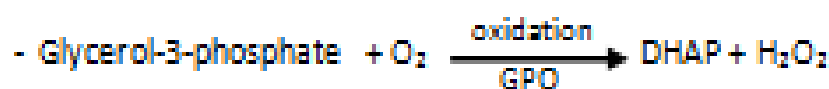


- as color's intensity increases, [H₂O₂] increases.
- [H₂O₂] describes the concentration of Triglyceride.
- Triglyceride's reagent consists of: LPL, GK, GPO, POD. When it reacts with triglyceride it gives us Quinoimine (pink – red)

• سلسلة المعادلات هذه هي للوصول للون ملحوظ. لذا، كي نصل لهذا اللون سنحتاج إلى مجموعة من العناصر. حفظهم مهم.

• تتناسب درجة اللون طردياً مع تركيز H₂O₂، تركيز H₂O₂ يعبر عن تركيز ال Triglyceride في العينة.


● Practical part:

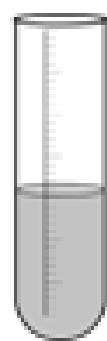

1ml

(Blank)


Reset the device

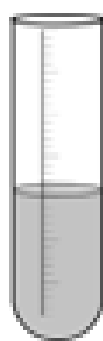

1ml

10 μ l

Serum

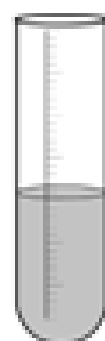

1ml

10 μ l

standard (200mg/dl)

Remember: blank solution is the solvent without any solute; we reset the device on it to neglect the solvent's absorption.

"أما مثل العيزان، تصفر العيزان بعد وضع الوعاء كي لا نحسب وزن الوعاء."

Procedure:

- Prepare three test tubes then add 1ml of reagent to each one of them.
- Add 10 μ l of the sample (serum) to the second test tube.
- Add 10 μ l of the standard to the third test tube.
- Measure the absorbance by spectrophotometer at 37 degrees at 500nm wavelength.
- Find the concentration of the sample by beer's law.

"نقوم بإضافة ال reagent على محلول ذا تركيز معروف من ال Triglyceride ونقوم بحساب A له، ثم نقوم بإضافة ال Reagent على Serum لنقوم بحساب A له، وبالقانون نحسب تركيز ال Triglyceride في الدم."



$$A_1/C_1 = A_2/C_2$$

A_2, A_1 يتم أخذها من الجهاز مباشرة

$$C_{\text{standard}} = 200 \text{ mg/dl}$$

$$C_{\text{sample}} = (A_{\text{sample}} * C_{\text{standard}}) / A_{\text{standard}}$$

2nd experiment: Glucose

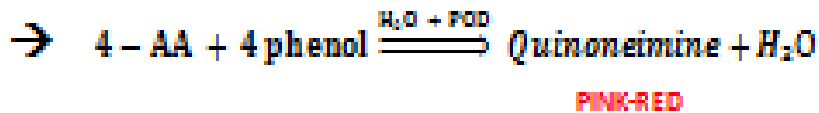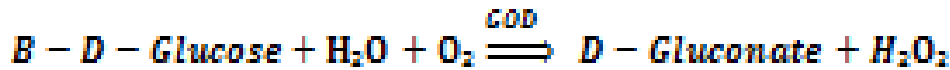

Oxidation $\rightarrow H_2O_2$ appears $\rightarrow$ Quinoneimine appearance.

Glucose's reagent consists of: GOD, POD. It gives Quinoneimine (pink).

● Practical part:

- Add 3 test tubes each with 1 ml of reagent
- Add of serum to the test tube number 2
- Add 10 μ l of standard glucose to test tube number 3
- Because the first one is blank, contains the reagent only. Don't add anything else.
- Measure the absorbance at 37° C, $\lambda = 500\text{nm}$
- Then measure the concentration by beer's law.

$$\lambda_{\max} = 500 \text{ nm}$$

$$A_1/C_1 = A_2/C_2$$


A1, A2 يتم أخذها من الجهاز مباشرة

$$C_{\text{standard}} = 100\text{mg/dl}$$

3rd Experiment: - Cholesterol

- Cholesterol is found in two shapes: Free (minor)

Esterfied (major)

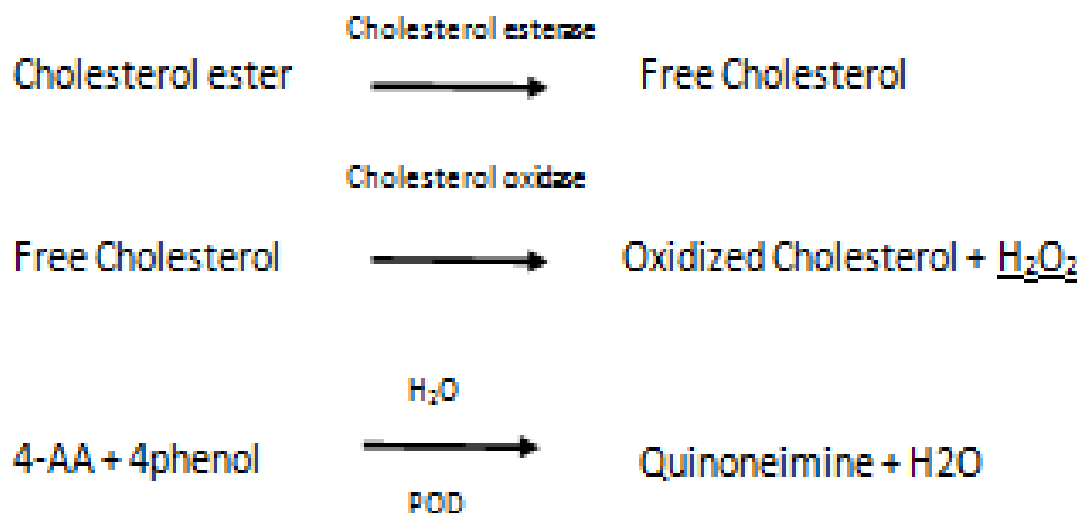

- Cholesterol's agent consists of: Cholesterol esterase, POD

"الشيء المشترك و الأساسي في الثلاث تجارب السابقة Triglyceride, Glucose, Cholesterol هي عملية الأكسدة Oxidization لتحويل على الـ H_2O_2 الذي يظهر الـ Quinoneimine".

Practical part:-

- Add 3 test tubes with 1mL of reagent on each one.
- Test tube 1 will be Blank, add 10 μ L of the sample (serum) to test tube 2, and 10 μ L of standard to test tube 3.
- Then measure the absorbance at 37° and at
- Then measure the concentration by Beer's Law.

$$\lambda_{\text{max}} = 500 \text{ nm}$$


$$A_1/C_1 = A_2/C_2$$

A1, A2 يتم أخذها من الجهاز مباشرة

$$C_{\text{standard}} = 200 \text{ mg/dl}$$

4th Experiment: - proteins

- Albumin is considered 60 – 70% of plasma protein

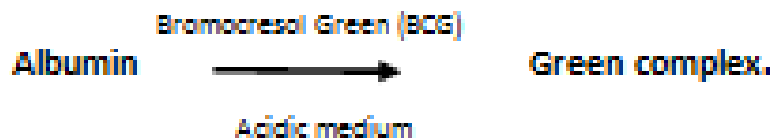

- as Color's intensity increases, albumin's concentration increases

"الدرجة اللونية التي يتطابق تناسب طرديا مع تركيز الـ albumin".

- Albumin's reagent consists of: BCG.

• Practical Part:

- Add 3 test tubes with 1 ml reagent to each one
- Add 10 ml of the sample and of the standard to the test tubes
- Measure the absorbance , At 37 C with $\lambda_{max} = 630$
- Find the concentration by beer's law.
- standard concentration for albumin = 5 mg/dl

$\lambda_{max} = 630 \text{ nm}$

→ Let's summarize it:

We have two ways to determine the concentration of the components in the plasma:

Enzymatic	Colorimetric
-Triglycerides - Cholesterol - Glucose	-Albumin
➤ هون ينضيف عليهم Enzyme مختلفين عشوائياً يصير لهم لون ونقيس الـ Absorbance و عن طريق Beers law نطلع الـ concentration	➤ الفرق هون انه ما يضيف له Enzyme كسفر بل استخدمنا dye (صبغة) عشوائياً نطلع منها complex ونقاسل معه حسب الـ Absorbance والـ beers law

- Here we will try to summarize things you should remember:

Triglyceride's reagent: LPL, GK, GPO, POD

Triglyceride's λ_{max} : 500 nm

Triglyceride's standard conc.: 200 mg/dl

Glucose's reagent: GOD, POD

Glucose's λ_{max} : 500 nm

Glucose's standard conc.: 100 mg/dl

Cholesterol's reagent: Cholesterol esterase, POD.

Cholesterol's λ_{max} : 500 nm

Cholesterol's standard conc.: 200 mg/dl

Albumin's reagent: BCG (indicator)

Albumin's λ_{max} : 630 nm

Albumin's standard conc.: 5 mg/dl.



THE END

DONE BY: Hussein Alsaleh, Hisham Darwish, Dina Nasser Eddine, Lynne Abdullah, Abed Al Hadi Raed, Omar Al-Ali, Danah Alghanim and Ayham Haddad.

Questions:

1-All of the followings are used as a reagent in triglycerides experiment except:

A – LPL

B – GOD

C – GK

D – POD

2- We add to all of the following experiments a different enzymes as a catalyst to get the concentration except?

A – Triglyceride.

B – Cholesterol.

C – Glucose.

D – Albumin.

3 – The colour of Quinoneimine is directly proportional to the concentration of H_2O_2 ?

A – True.

B – False.

Answers: -

1 – GOD (B)	2- Albumin (D)	3- True (A)
-------------	----------------	-------------